

medyglōbal

seventy hyal

2000

protocolo de
aplicación

Protocolo de aplicación

Protocolo recomendado para procedimientos mínimamente invasivos

La técnica del retrotrazado

Evitar el eritema [enrojecimiento], la hinchazón y el traumatismo. ¿Cómo?

Evitar los bolos. No levantar deliberadamente las vesículas superficiales.

Inyectar **Seventy Hyal 2000** únicamente mediante vectores retrotrazantes [es decir, inyectar sólo mientras se retira la aguja] en la dermis media.

Pueden ser horizontales o verticales [ver Fig. 1].

La aplicación puede ser como un único vector retrotrazante de ~1cm de volumen de 0,025 - 0,05 ml, repetido donde las arrugas [rhytids] son evidentes, o en el caso de vectores horizontales, "en abanico" - x3 vectores retrotrazantes cada uno ~0,03 ml. Esta técnica es más útil en las regiones de las mejillas y nasolabial/marioneta.

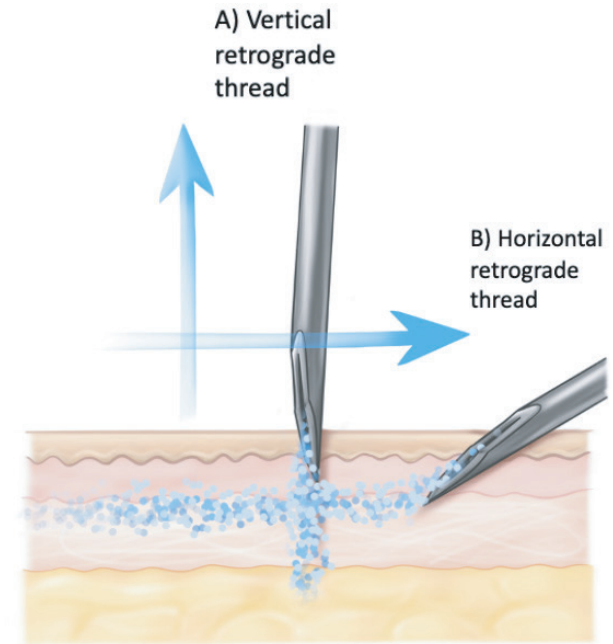


Fig.1

Vectores lineales retrotrazados: A) Aguja vertical insertada perpendicularmente a la piel, para apuntar a la profundidad de la dermis reticular más profunda, **Seventy Hyal 2000** inyectado al retirar la aguja hasta la dermis superficial.

B) Hilo horizontal, aguja insertada en la dermis media en línea con la superficie de la piel. De nuevo, se inyecta al retirar la aguja.

Protocolo de aplicación

3 claves para reducir el dolor

Minimice aún más el tiempo de inactividad y el dolor siguiendo estos tres pasos:


Anestesia tópica 20 minutos antes LMX-4 o similar

Uso de hielo

Teoría de la vibración

Consejo del cirujano Dr. Mark Gorman:

Aunque no es esencial, el Dr. Mark recomienda el uso de hielo durante el tratamiento para aliviar el dolor y minimizar los hematomas y la hinchazón.

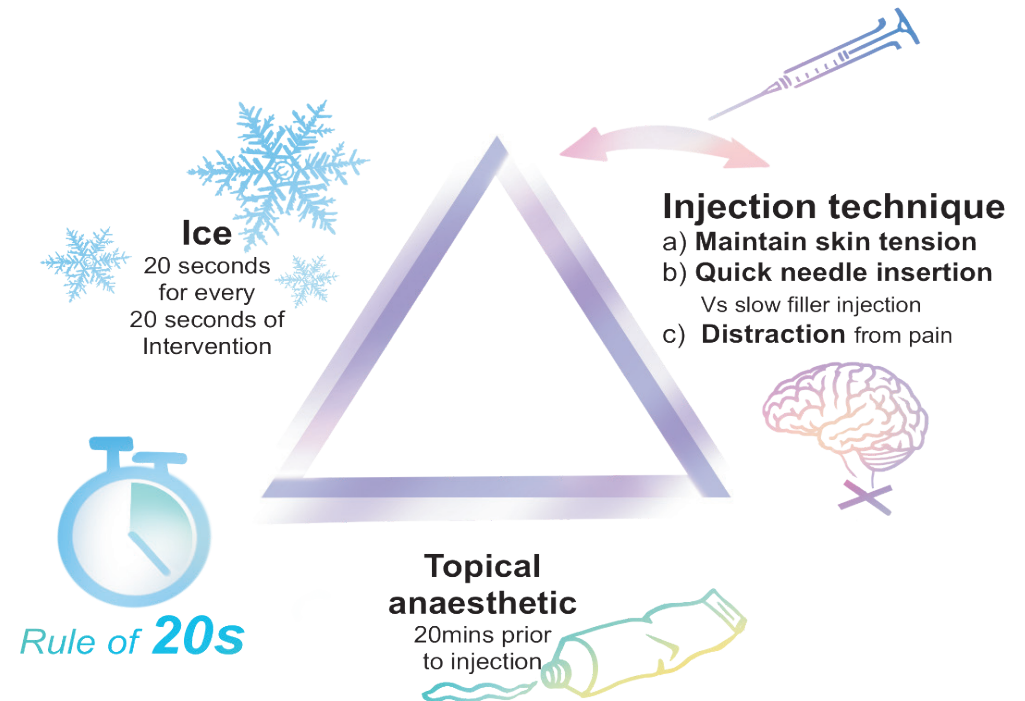

Áreas de tratamiento del protocolo de aplicación

Mejillas y patas de gallo

Zona de las mejillas

Región que traza un mapa desde el cigoma superior, hasta 1 cm lateral a la línea nasolabial/marioneta, y hacia abajo hasta la mandíbula.

Utilizar el método de abanico vertical u horizontal

Vectores retrotrazantes verticales espaciados 1 cm^2 entre sí.

Volumen p/vector $\sim 0,025-0,05 \text{ ml}$. Por lo tanto para las mejillas la cantidad total serían máximo $\sim 2 \text{ mls}$.

Los vectores retrotrazantes horizontales en abanico se espacian cada $1,5 \text{ cm}^2$. Cada abanico incluye x 3 pasadas, todos los vectores retrotrazados se inyectan en la dermis media mientras se retiran, sin quitar la aguja. El volumen máximo de cada vector es de $\sim 0,03 \text{ ml}$, por lo que el p/abanico total es de $\sim 0,01 \text{ mls}$ como máximo. De nuevo, la cantidad para un tratamiento de mejilla es de $\sim 2 \text{ mls}$ máximo.

Tips para las mejillas - En clientes mayores con papada no añadir peso a esta región - corresponde al 1/3 medio de la mandíbula.



Patas de gallo

Inyectar desde 1 cm lateral al canto lateral [esquina] del ojo [por ejemplo] reborde orbitario.

En esta zona utilizar sólo vectores horizontales. Volumen p/vector: $\sim 0,05 \text{ mls}$.

Empezar en línea con el canto lateral, luego espaciar otros vectores $0,5 \text{ cm}$, paralelos, una media de 3 por encima y 3 por debajo del primer vector.

Manténgase superficial y evite las venas para evitar hematomas.

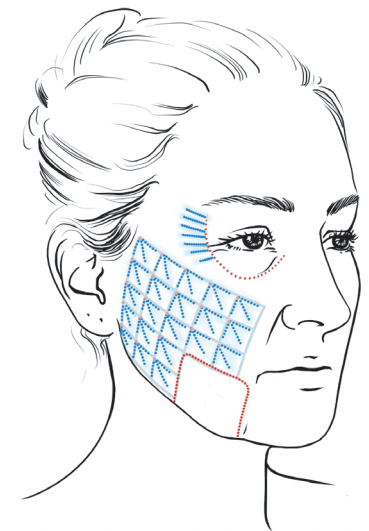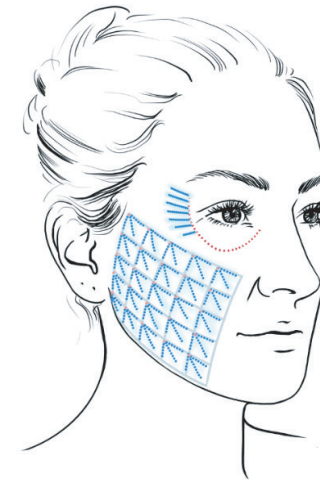

Áreas de tratamiento del protocolo de aplicación

Área del cuello


Cuello

Región que abarca desde el hueso hioides hasta el lóbulo de la oreja y, como máximo, hasta el inicio del cuello.

Crear una cuadrícula con puntos de inyección separados 1,5 cm que equivaldrá a unas 16-20 inyecciones por cada lado del cuello.

Inyectar en la dermis pero a no más de $\frac{1}{2}$ aguja de profundidad.

Volumen p/inyección ~0,025 - 0,05 ml. Por tanto, máximo total en el cuello ~2 ml.

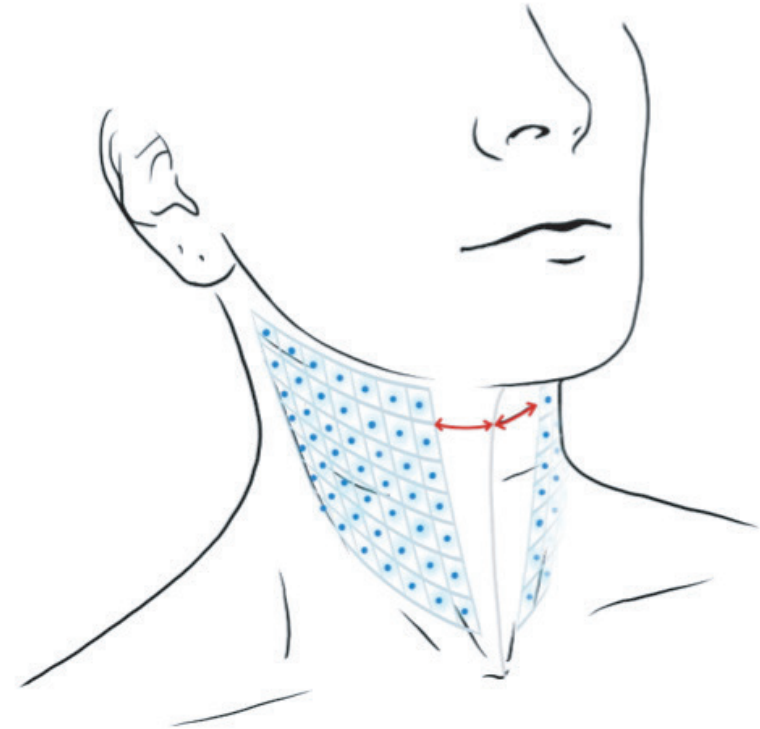

Áreas de tratamiento del protocolo de aplicación

Surco nasolabial y línea de marioneta

Surco nasolabial y línea de marioneta


Siga la línea vertical por el surco nasogeniano y las líneas de marioneta.

Marque vectores retrorazantes en abanico en 3 x abanico o en 2 x abanico, dependiendo de dónde se necesite volumen.

Evite aplicar demasiado producto justo por encima de la línea de los labios.

Inyectar en la dermis media.

Volumen p/ inyección ~0,02 mls - 0,03 mls por vector.
0.1 ml por abanico.

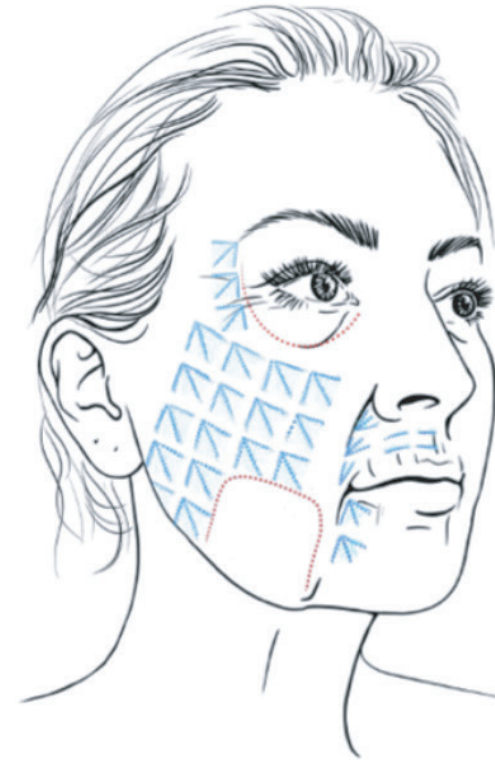

Áreas de tratamiento del protocolo de aplicación

Área del lagrimal

Surco nasolabial y línea de marioneta

Colocar al paciente a 40 - 60 grados.

Utilizar una cánula de 25G x 50 mm.


El punto de entrada está en línea con el canto alar y el canto lateral, justo en el centro de la mejilla.

Fosa lagrimal:

Colocar la cánula superficialmente por encima del músculo orbicular. Inyectar vectores retrotrazantes de 0,01 ml en toda la zona. No rellenar en exceso.

Deformidad en V invertida:

Colocar la cánula superficialmente. Inyectar vectores retrotrazantes de 0,01 ml en toda la zona.

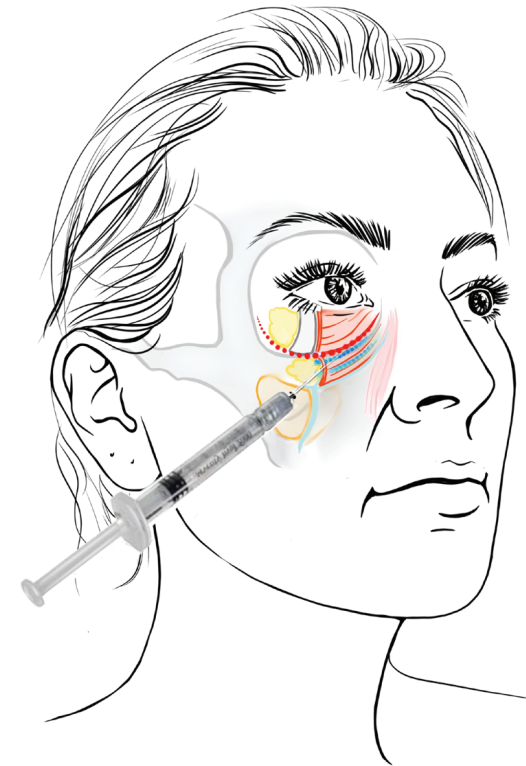

Áreas de tratamiento del protocolo de aplicación

Labios y perioral

Protocolo de inyección labial

Utilice aproximadamente 1 ml de **Seventy Hyal** en los labios, no más.

Inyectar 3 veces en cada cuarto del labio. Inyecte superficialmente de forma horizontal en línea con la línea mucocutánea o borde húmedo-seco.

Esta es la parte media del labio donde la mucosa húmeda se encuentra con la mucosa seca. Inyectar 3 vectores retrotrazantes de 0,1 ml en cada cuarto del labio.


Tip 1

Cambie la aguja en cada cuarto del labio para asegurarse de que la aguja se mantiene afilada.

Tip 2

Estire los labios antes de cada inyección.

Nota: el producto sólo se utiliza para hidratar los labios y añadir temporalmente un poco más de volumen.

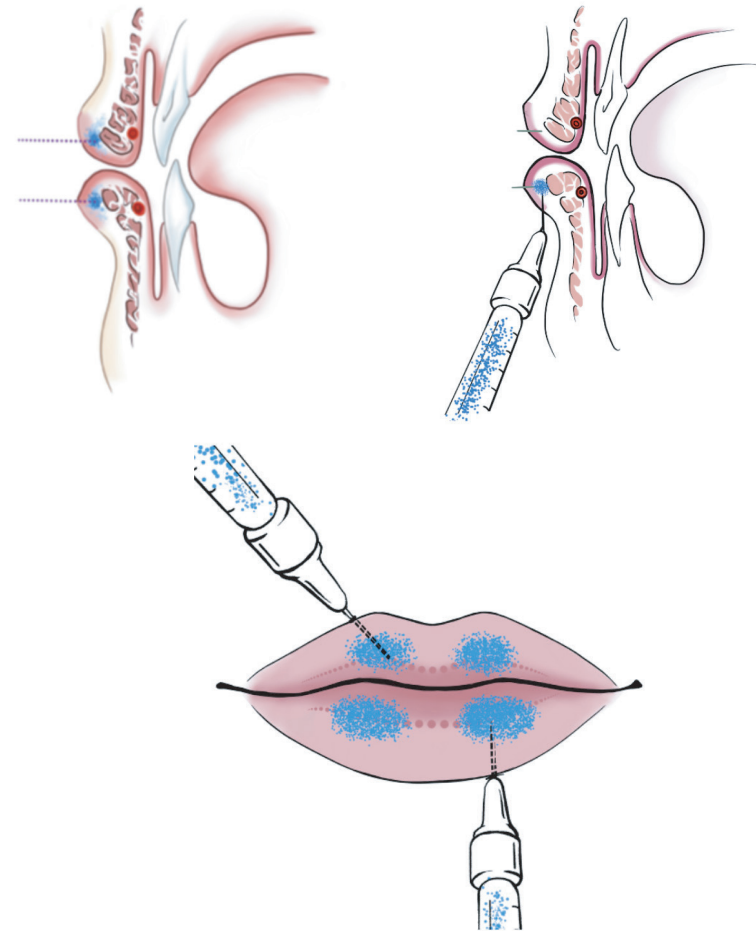

Técnica BAP

Puntos Bio Estéticos


Técnica BAP

Esta técnica de inyección permite enfocar la acción de **Seventy Hyal** donde la piel aparece más laxa y envejecida, concentrando un volumen definido del compuesto en unos puntos anatómicamente identificados.

El producto se difunde progresivamente a través de los espacios intersticiales, aportando un ambiente natural y un aspecto renovado y duradero para todo lo que es el borde malar y submalar.

5 puntos de inyección BAP: 0.2 ml por bolo a nivel de dermis profunda.

2 tratamientos después de un mes seguidos de un mantenimiento de dos meses según el nivel de envejecimiento.

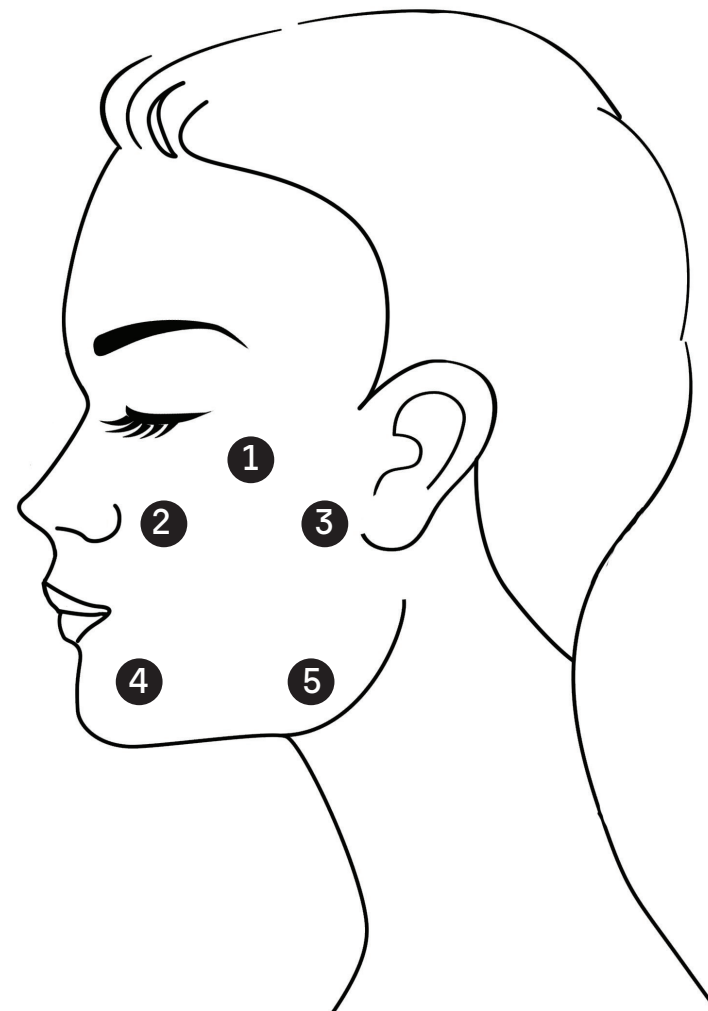

Técnica BAP

Puntos Bío Estéticos


1

PROTUBERANCIA ZIGOMÁTICA

Asegúrese de estar al menos a 2 cm del canto externo del ojo.

5 puntos de inyección BAP: 0.2 ml por bolo a nivel de dermis profunda.

2 tratamientos después de un mes seguidos de un mantenimiento de dos meses según el nivel de envejecimiento.

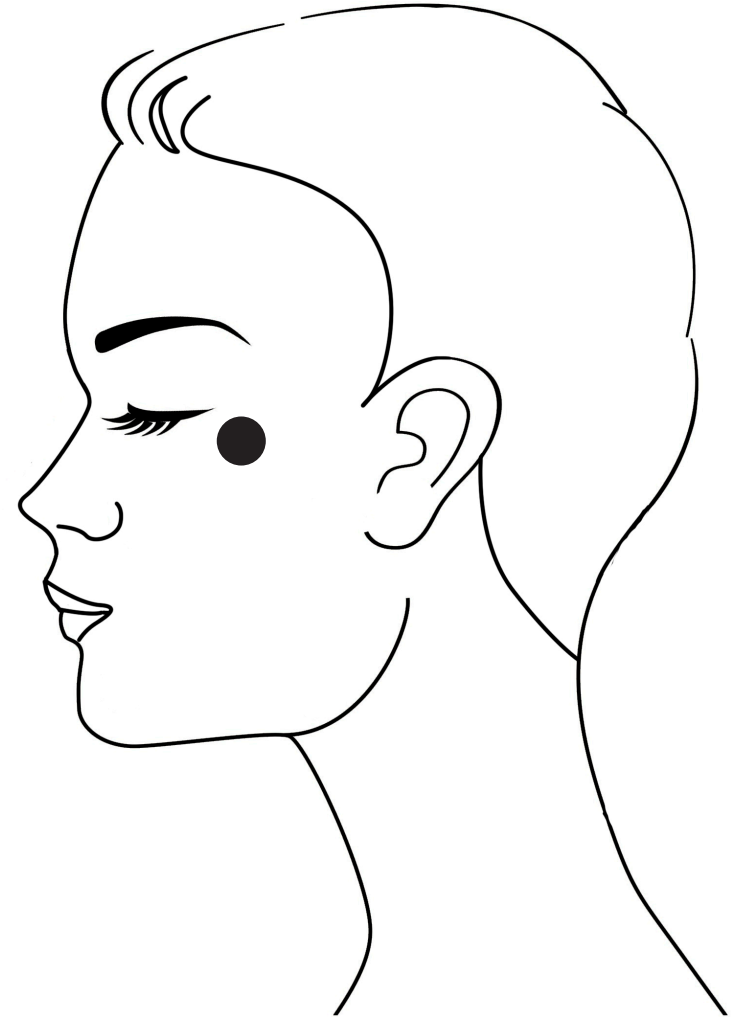

Técnica BAP

Puntos Bío Estéticos


2

BASE NASAL

Dibuja una línea entre la fosa nasal y el tragus.

Dibuja una línea perpendicular desde la línea de la pupila.

Identificar el punto de inyección en la intersección de las dos líneas.

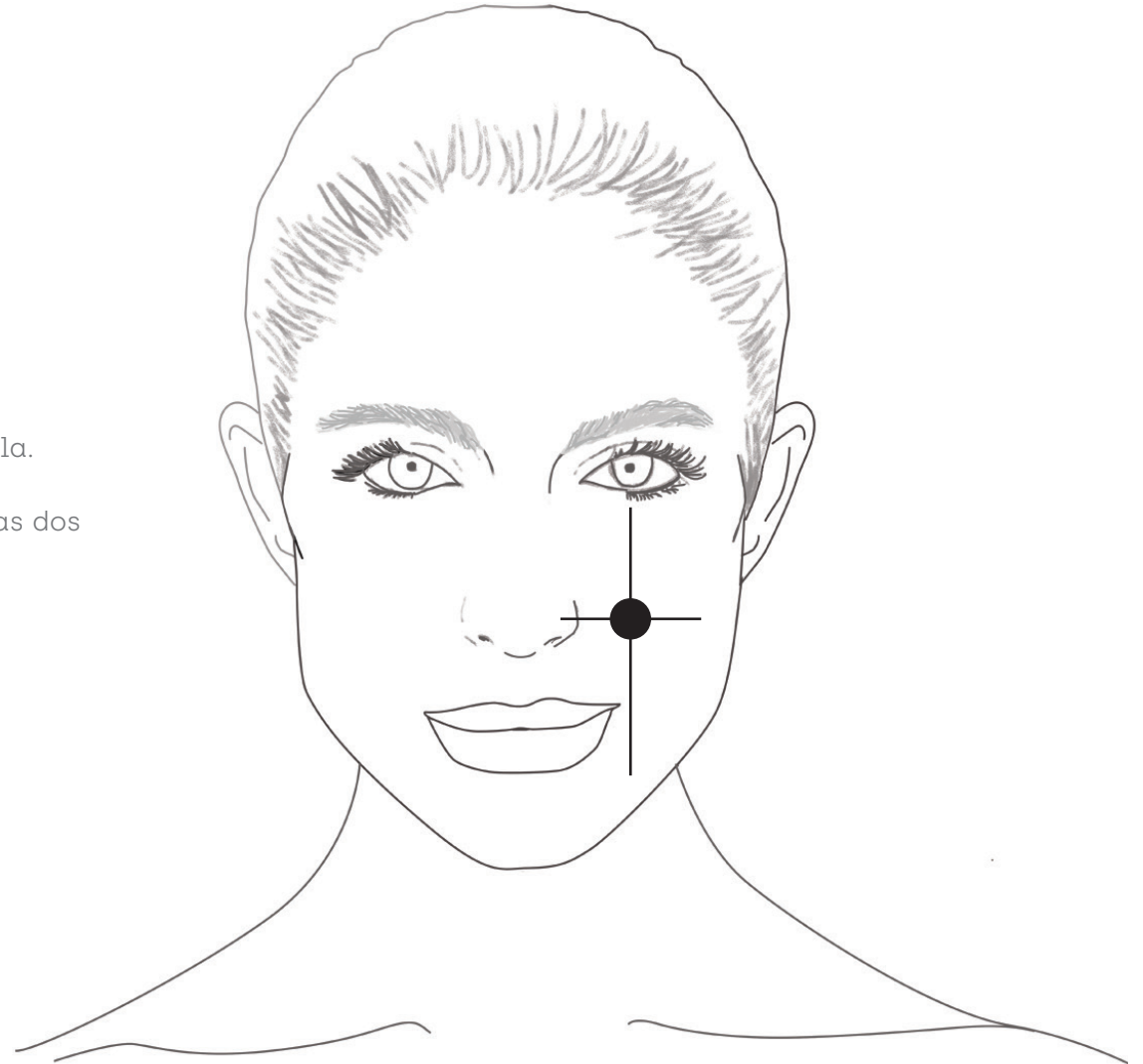


Técnica BAP

Puntos Bío Estéticos

3

TRAGUS

Asegúrese de estar 1 cm por delante del margen inferior del tragus.

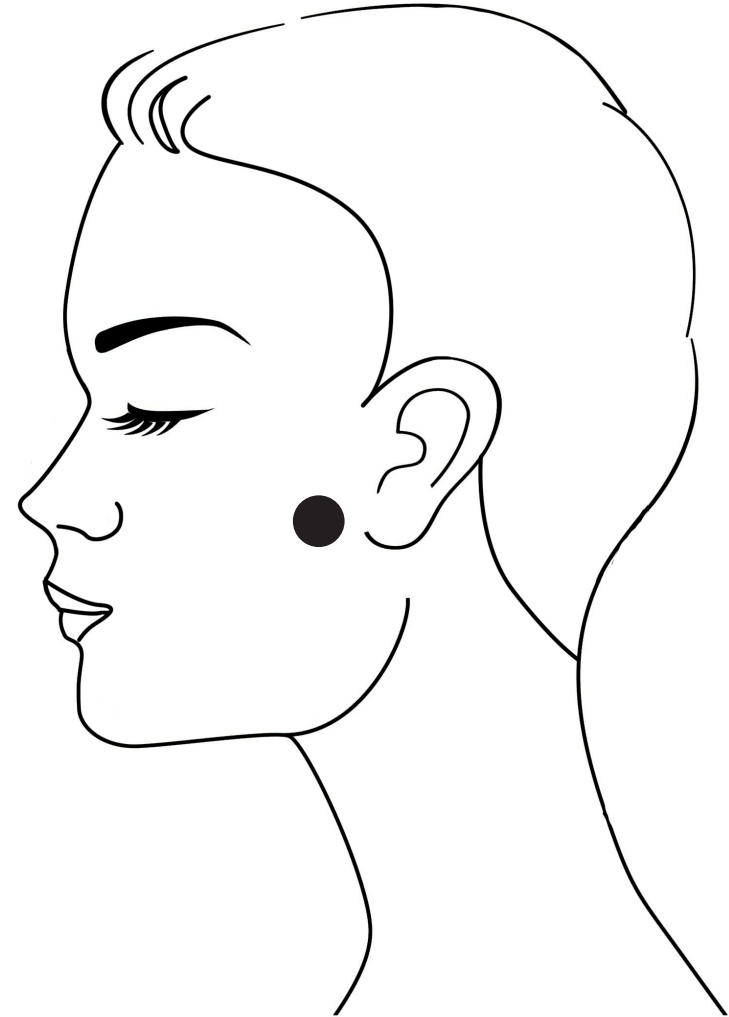

Técnica BAP

Puntos Bío Estéticos


4

MENTÓN

Dibuja la línea media de la barbilla.

A un tercio de esta línea dibuje la línea perpendicular.

Desde el punto de intersección, mueva 1,5 cm hacia las comisuras labiales para identificar el sitio de inyección.

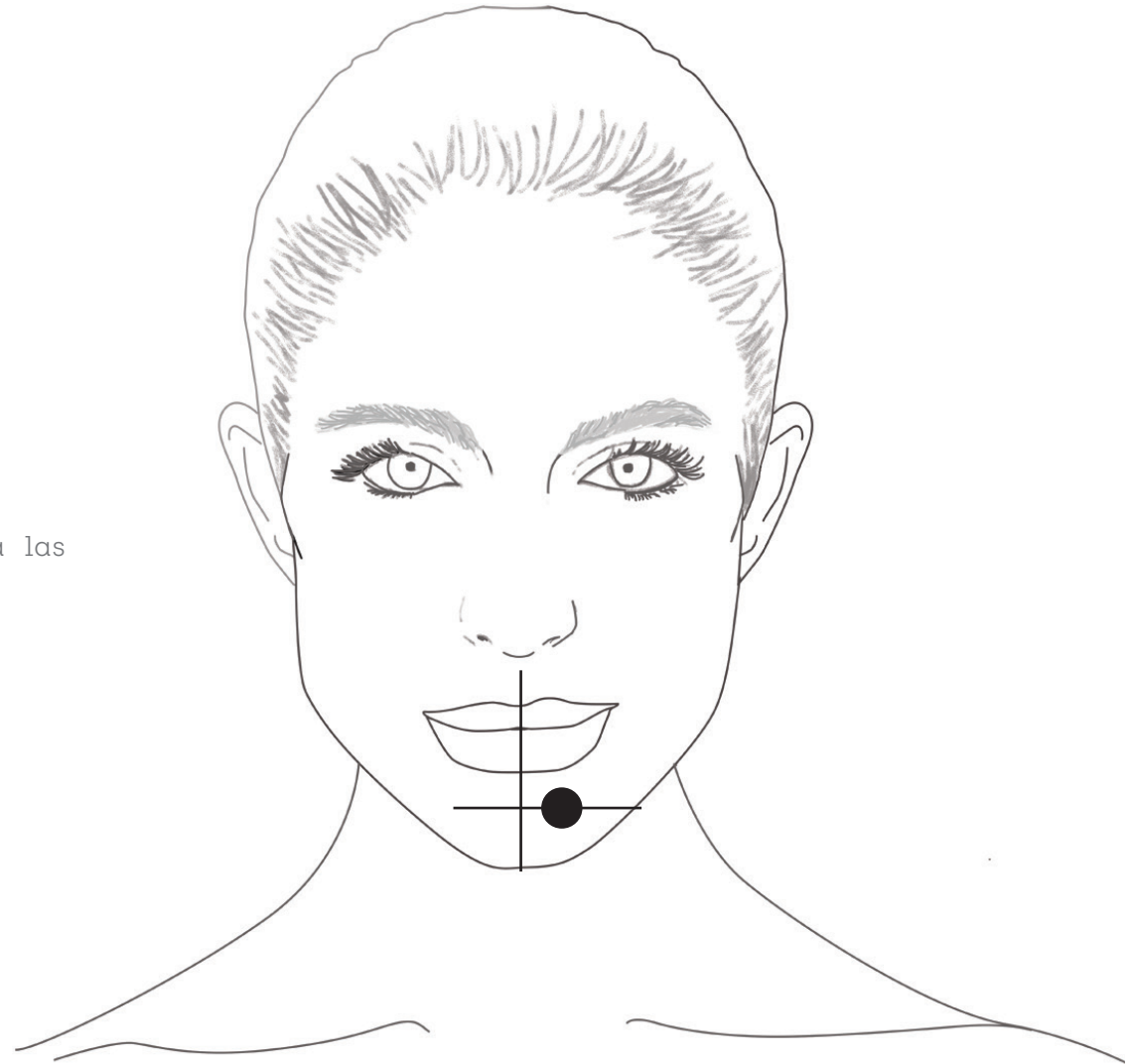


Técnica BAP

Puntos Bío Estéticos

5

ÁNGULO MANDIBULAR

1 cm por encima del ángulo mandibular.

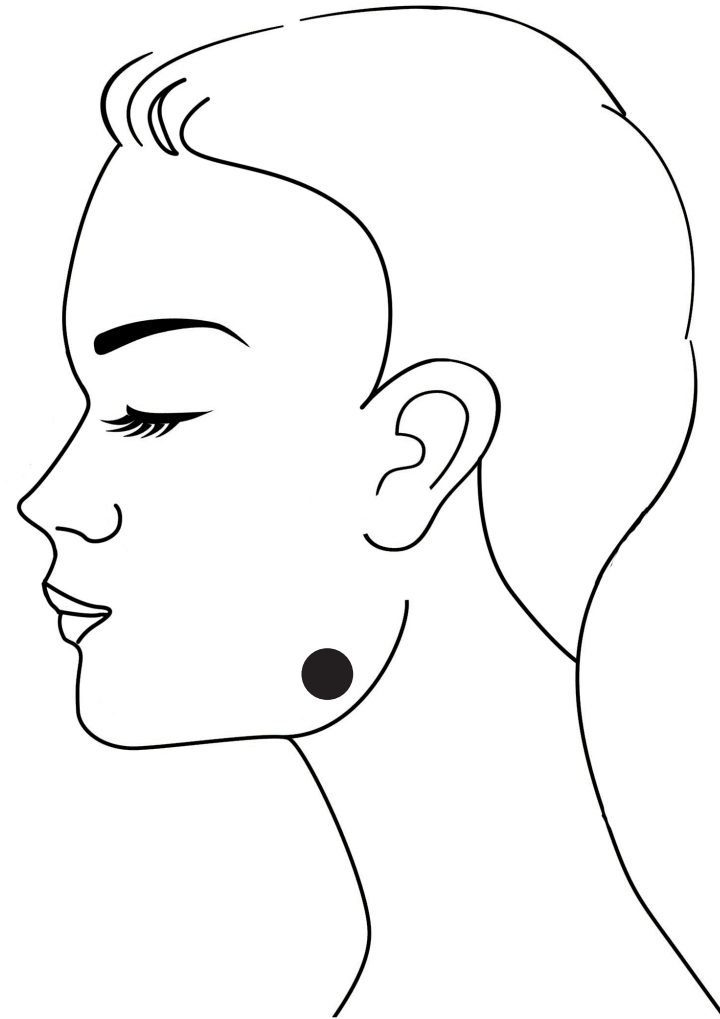

seventy
hyal 2000

medyglōbal

Plaza Mayor nº 8, local 7.
28939 Arroyomolinos. Madrid.
+34 91 827 09 52
www.medyglobal.com